


350-8391-002

Bluetooth for Printer LP 4024,
Power Supply via Power Adapter, 390/360/321/365

Bluetooth für Drucker LP 4024,
Speisung über Netzadapter, 390/360/321/365

Scope of delivery – Lieferumfang

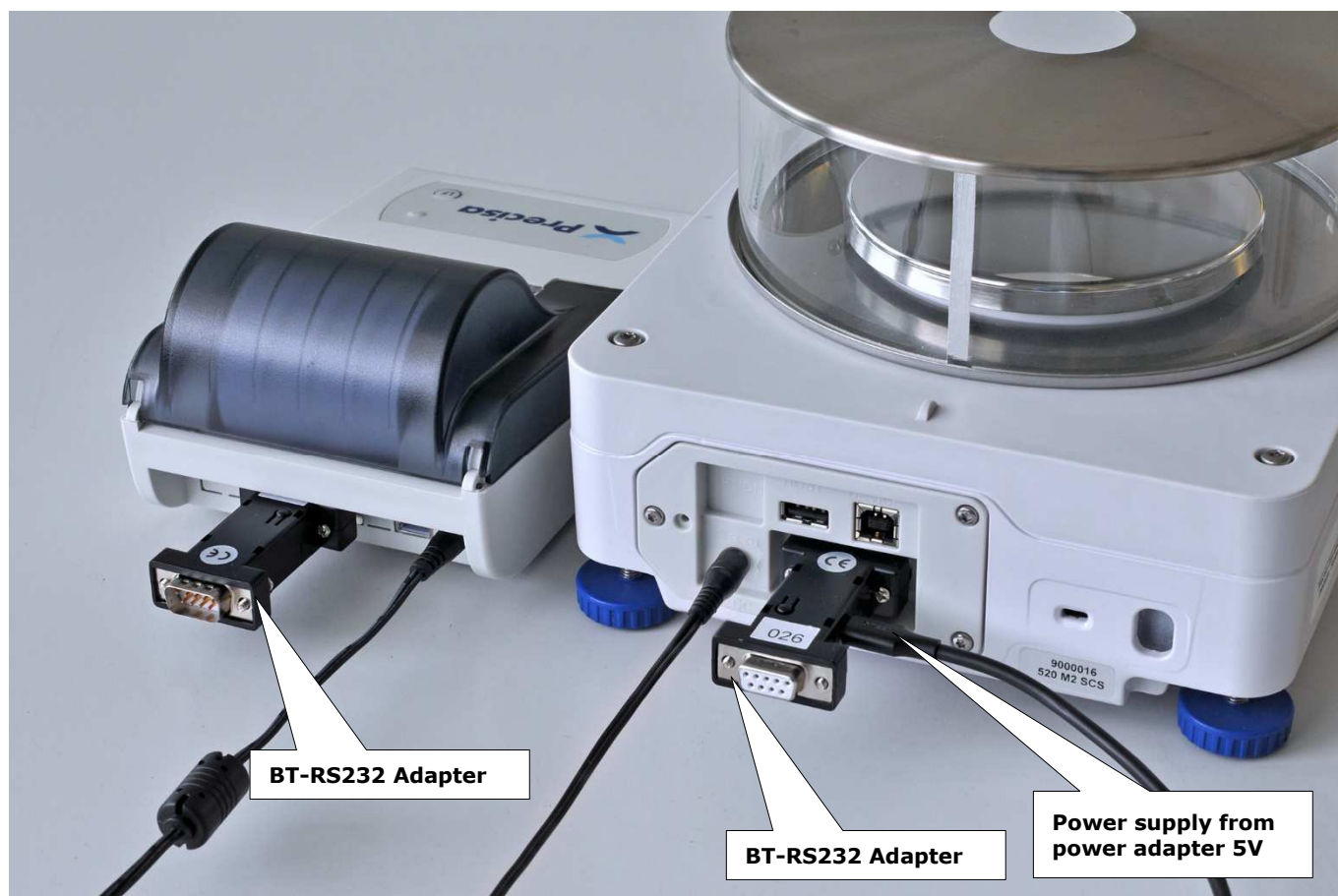

Pos.	Pcs.	Item number	Item	Artikel
1	1	350-8391-001	BT-RS232 Adapter, pair	BT-RS232-Adapter, Paar
	1		Pwr. supply cable USB 2.0A-MicroB	Speisungskabel USB 2.0A-MicroB
2	1	PN 3606-029	Power adapter 5V	Netzadapter 5V

Starting up

The adapters are coupled ex works (9600Bd, 8-No-1; handshake is not operated).

1. Plug an adapter into the balance and power it with the included 5V power adapter.
2. Plug the other adapter into the printer. This is powered directly from the printer.
3. Switch on balance and printer.
4. Ensure the serial interface of the balance is set to 9600Bd, 8-No-1.

Inbetriebnahme

Die Adapter sind ab Werk gekoppelt (9600Bd, 8-No-1; Handshake wird nicht bedient).

1. Einen Adapter an die Waage stecken und mit beiliegendem 5V-Netzadapter speisen.
2. Den anderen Adapter an den Drucker stecken. Dieser wird vom Drucker direkt gespeist.
3. Waage und Drucker einschalten.
4. Sicherstellen, dass die serielle Schnittstelle der Waage auf 9600Bd und 8-No-1 eingestellt ist.