



Kompaktwaagen Serie BJ160

*Mehr für weniger!
Und alles, was man braucht.*

- *Grosse viereckige Waagschale und Anzeige*
- *Kompakte Bauweise*
- *Internet-Download*
- *Batteriebetrieb*
- *Datenausgang RS232*
- *Mechanische (Option) und elektronische Diebstahlsicherung*
- *Akkupack eingebaut (Option) – Betriebsdauer bis 12 Std.*
- *Swiss made – 2 Jahre Garantie*

Wer alles abwägt, wägt mit uns!

Precisa

■ The Balance of Quality ■




Bedienerfreundlich

Nichts ist leichter, als die Waage zu bedienen. Mit nur fünf Tasten steuern Sie alle Funktionen. Die klar strukturierte Menüführung in der grossen Anzeige erleichtert Ihnen die Einstellungen und lässt Sie auch Betriebsänderungen sowie Wiegeabläufe einfach ausführen.



Anzeige

In der Praxis bewährt: Die grosse, multifunktionale Flüssigkristallanzeige. Dieses nützliche Element kann, anstatt im Waagengehäuse integriert, ebenfalls auf einer Stütze hinten an der Waage montiert werden.

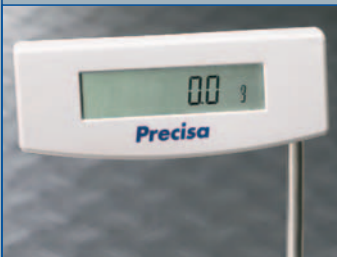

Zweitanzeige

Ob freistehend oder angebaut, dank dieser Anzeige kann das Wiegeergebnis auch von mehreren Personen oder einem Kunden eingesehen und kontrolliert werden.



Transportkoffer

Zum Schutz der Waage und zu Ihrem Komfort – der Transportkoffer erfüllt gleich beides.




Diebstahlsicherung

Mittels vierstelligem Code ist diese Precisa Waage gegen Diebstahl gesichert, dazu gibt es als Alternative auch eine mechanische Sicherung (optional).



Alles drin, alles dran.

Und wir bleiben dabei – als grosse Stärke von Precisa darf das attraktive Preis-/Leistungsverhältnis bezeichnet werden, sowie das stetige Bemühen, auf alle Kundenwünsche einzugehen. Aus dieser Synthese heraus entstanden die Waagen der Baureihe BJ 160. Die 2-Jahres-Garantie, das robuste und solide Gehäuse, die grosse, gut lesbare Anzeige und der serienmässige Datenausgang RS232 sind nur einige der Pluspunkte, welche dieses Gerät auszeichnen. Summa-summarum eine Waage, die weder in der Bedienerfreundlichkeit noch in der Ausführung und schon gar nicht im Preis irgendwelche Wünsche offen lässt.

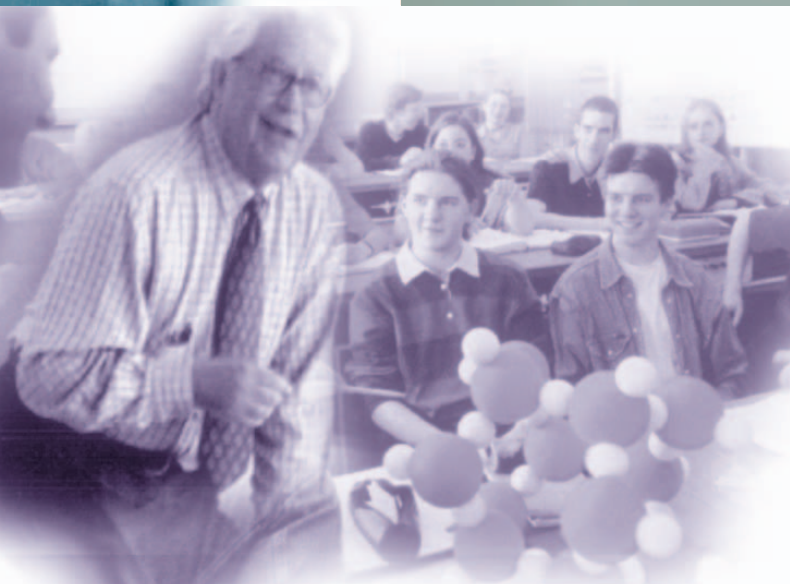

Intelligent Calibration Mode (ICM)

Das ICM erkennt automatisch das aufgelegte Justiergewicht. Die Protokollierung erfolgt nach ISO-Norm mit einem Kalibrierbeleg vom angeschlossenen Drucker.

Benutzermenü (UMM)

Sie können Ihre persönlichen Waageneinstellungen speichern und bei Bedarf wieder aufrufen.


Precisa

■ The Balance of Quality ■



Eingebaute Funktionen

Dank automatischer Referenzoptimierung ermittelt sie genaue Stückzahlen, ermöglicht Einheitenumrechnungen, Prozentumrechnungen, Tierwägungen und vieles andere mehr (siehe auch Techn. Daten auf der Rückseite).

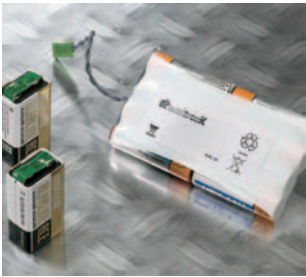

Akku- und Batteriebetrieb

Der standardmässige Batteriebetrieb macht die Waagen bis ca. 5 Stunden vom Netz unabhängig. Mit dem eingebauten Akkupack (optional) erhöht sich diese Betriebszeit auf bis zu 12 Stunden.



Stellfüsse / Libelle

Mit den Stellfüssen und dank der Libelle kann die Waage einfach nivelliert werden.

Software up-date / down-load per Internet

Die serienmässige Schnittstelle ermöglicht dies so einfach wie nie zuvor: Laden Sie einfach all Ihre Anwendungen über das Internet auf die Software der Waage.

Technische Daten Precisa Waagen BJ160

Specifications		BJ60M	BJ100M	BJ210C
Wägebereich	g	62	102	210
Ablesbarkeit	g	0,001	0,001	0,01
Einschwingzeit	s	4	4	2
Reproduzierbarkeit	g	0,002	0,002	0,01
Linearität	g	0,002	0,002	0,02
Waagschale	mm	Ø 100 inkl. Windschutz		
Material der Waagschale				
Grösse der Waage	mm			
Gewicht	kg			
Art der Anzeige				

Technische Daten Precisa Waagen BJ160

RS232-Schnittstelle

Unterflurwägevorrichtung

Batterie

Batteriestandanzeige

Betriebsdauer

Integrierte Akkus / automatische Aufladung

Akkustandanzeige

Betriebsdauer

Auto-Abschaltfunktion

Unter- / Überlastanzeige

Überlastschutz

Abgedichtete Frontanzeige

Diebstahlsicherung mechanisch

Diebstahlsicherungscode elektronisch

Libelle / Stellfüsse

Stückzahl-Funktion

Andere Einheiten

Prozent

Summieren

Statistik

Netto-Total

Tierwägung

GLP Protokollausdruck

Automatische Kalibrierung mit ext. Prüfgewicht

Möglichkeit zum .5Herunterladen vom Internet

Standard

Mit einer übergestellten Anzeige

Standard / vorbereitet für Zweitanzeige

Transportkoffer

Drucker

Akkupack

Arbeitsschutzhaube

Haken für Unterflurwägeeinrichtung

Diebstahlsicherung

Zweitanzeige freistehend *

Übergestellte Anzeige *, 120mm / 240 mm

* Verbindungsprint für Waagen mit Index 160-xxxx-050

Technische Änderungen vorbehalten.



